

**CASCO CON CERNIERA
PER TERAPIA CPAP**
COLLARE IN SILICONE



HAROL

Il Vostro respiro

la nostra missione

FAST-HAR

Il casco **FAST - HAR** è concepito per la ventilazione non invasiva CPAP in ambiente ospedaliero. L'utilizzo del casco permette di effettuare la **terapia in pressione positiva con flussi più elevati** rispetto a quelli utilizzati con le maschere facciali.

È RACCOMANDATO PER:

Edema polmonare cardiogeno - Insufficienza Respiratoria Acuta (IRA) - Edema polmonare non cardiogeno (A.L.I. - ARDS) - Trauma toracico - Atelectasia - Ipossipemia post-operatoria - Asma.

» CARATTERISTICHE TECNICHE

- La perfetta tenuta è garantita da un **collare in silicone** morbidissimo (unico casco in commercio ad essere dotato di collare in silicone).
- Il casco è dotato di **bretelle di ancoraggio imbottite** (a Ph neutro) e munite di **dispositivo di aggancio/sgancio rapido** (con il cuscino opzionale è possibile usare il casco anche senza bretelle).
- Una **tasca sull'ingresso del flusso** indirizza il flusso tangenzialmente alla tenda per ridurre il rumore e per evitare l'arrivo diretto sul volto del paziente.
- La **valvola antisoffocamento bidirezionale** è integrata sulla tenda e si apre automaticamente quando la pressione all'interno del casco scende al di sotto di 2 cmH₂O.
- La tenda trasparente è in PVC; il dispositivo è LATEX FREE e DEHP FREE
- Volume della tenda: 15 litri - Peso: 410 gr.
- Connessioni 22F/22M conformi alla norma ISO.

» VANTAGGI

FACILE UTILIZZO: il casco in un unico pezzo risulta pratico e facile da mettere o togliere.

RAPIDO ACCESSO AL PAZIENTE: grazie alla comoda cerniera, è possibile l'effettuazione della pulizia del volto o broncoaspirazioni, da parte di un solo operatore.

CONFORTEVOLE: il cuscino gonfiabile (opzionale) migliora ulteriormente il comfort del paziente, dando sostegno cervicale e maggiore stabilità al casco e permettendone l'utilizzo senza bretelle ascellari.

PERFETTA TENUTA: l'esclusivo collare in silicone garantisce la tenuta sul collo senza dover tirare eccessivamente le bretelle.

MODULABILE: con lo stesso casco è possibile passare dall'uso con bretelle all'uso senza e viceversa.


Utilizzare il casco con dispositivi e apparecchiature idonee alla ventilazione CPAP a flusso continuo (valore minimo di flusso 40 l/min.)

IL DISPOSITIVO È MONOUSO NON STERILE

Valvola (integrata) antisoffocamento bidirezionale

Cuscino gonfiabile (opzionale)

Preso per rilevazione della pressione

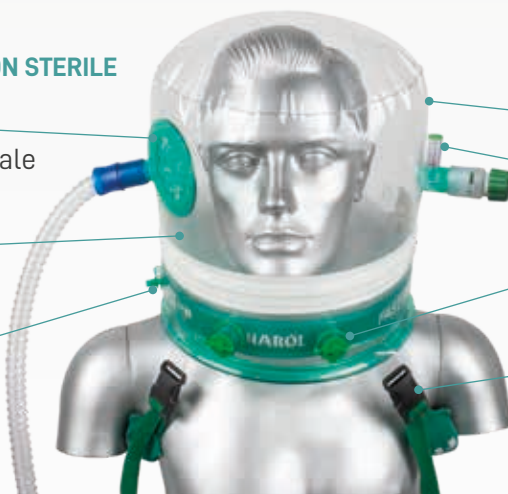

Tenda totalmente trasparente

Manometro integrato

Accessi a tenuta per sondini

Bretelle imbottite con sgancio rapido

IL CASCO È DISPONIBILE IN VARIE TAGLIE A SECONDA DELLA CIRCONFERENZA DEL COLLO DEL PAZIENTE.

SPECIFICHE

CODICE	TAGLIA	CIRCONFERENZA DEL COLLO	UNITÀ DI VENDITA
CPAP10451/XS	EXTRA SMALL	28-30 cm	singola
CPAP10451/S	SMALL	31-34 cm	singola
CPAP10451/M	MEDIUM	35-38 cm	singola
CPAP10451/L	LARGE	39-42 cm	singola
CPAP10451/XL	EXTRA LARGE	43-45 cm	singola
CPAP10451/XXL	2X LARGE	46-49 cm	singola
CPAP10451/3XL	3X LARGE	>= 50 cm	singola

MADE IN ITALY

HAROL

Via Marcora 53, 20097
San Donato Milanese (MI)
+39 02 5272788

info@harol.it
www.harol.it

